

福岡県医師会第1782号(地)

平成20年11月25日

各 医 師 会 長 殿



福岡県医師会

会長 横 倉 義 武

(公 印 省 略)

ジャクソンリース回路の回収等について（注意喚起及び周知依頼）

標記の件につきまして、厚生労働省医薬食品局安全対策課より日本医師会を通じて別紙のとおり周知方依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

麻酔用呼吸回路等に含まれているジャクソンリース回路（別添図参照。）のうち、別紙に掲げる製品については、気管切開チューブ等との組合せにより閉塞するおそれがあるため、平成13年から14年にかけて自主回収が行われました。

しかし、回収が徹底されていなかったため、今般、医療機関において回収対象であった製品が使用され、閉塞による気道内圧の上昇による肺損傷の事例が発生したことが判明し、東京都が五十嵐医科工業株式会社に対し、当該製品を回収するよう命令したところ です。

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、下記の内容について貴会会員への周知方につきましてご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

- 1 別紙に記載のジャクソンリース回路については、自主回収の対象となった製品であり、閉塞等のおそれがあり、患者に重大な健康被害を及ぼすおそれがあることから、各医療機関で使用している製品を確認し、該当製品を保有している場合、直ちに使用を中止し、各製造販売業者又は購入した医療機器販売業者に返却すること。
- 2 回収の対象外のジャクソンリース回路の使用時のみならず、呼吸回路の接続時には、添付文書や取扱い説明書等に従って接続し、呼気・吸気の回路が確保されているかを確認するとともに、閉塞やリークが生じていないか注意すること。

(医安 69)F
平成 20 年 11 月 21 日

都道府県医師会
医療安全担当理事殿

日本医師会常任理事
木下 勝



ジャクソンリース回路の回収等について(注意喚起及び周知依頼)

今般、厚生労働省医薬食品局安全対策課長より、別添の通り各都道府県衛生主管部(局)長宛通知した旨、本会宛連絡がありました。つきましては、下記の点について、貴会管下会員へのご周知方よろしくお願い致します。

記

- 別紙記載のジャクソンリース回路については、気管切開チューブ等との組合せにより閉塞するおそれがあるため、平成 13 年から 14 年にかけて自主回収が行われている。
- しかし回収が徹底されていなかったため、今般、回収対象であった製品が医療機関において使用され、閉塞による気道内圧の上昇による肺損傷の事例発生が判明した。
- 東京都は五十嵐医科工業株式会社に対し、当該製品を回収するように命令したところである。
- 同様の製品を使用した場合、閉塞等により患者に重大な被害健康を及ぼすおそれがあるため、別紙に記載された該当製品を保有の医療機関は、直ちに使用を中止し、製造販売業者又は医療機器販売業者に返却すること。

以上



享 務 連 絡
平成 20 年 11 月 19 日

社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省医薬食品局安全対策課

ジャクソンリース回路の回収等について(注意喚起及び周知依頼)

標記につきましては、別添写しのとおり各都道府県衛生主管部（局）長あて通知しましたので、御了知いただき、関係者に周知方よろしく御配慮願います。



薬食安発第 1119001 号

平成 20 年 11 月 19 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚生労働省医薬食品局安全対策課長

ジャクソンリース回路の回収等について（注意喚起及び周知依頼）

麻酔用呼吸回路等に含まれているジャクソンリース回路（別添図参照。以下「ジャクソンリース回路」という。）、のうち、別紙に掲げる製品については、気管切開チューブ等との組合せにより閉塞するおそれがあるため、平成 13 年から 14 年にかけて自主回収が行われました。

今般、回収が徹底されておらず、医療機関において回収対象であった製品が使用され、閉塞による気道内圧の上昇による肺損傷の事例が発生したことが判明し、本日、東京都が五十嵐医科工業株式会社に対し、当該製品を回収するよう命令したところです。

同様の製品を使用した場合、閉塞等により患者に重大な健康被害を及ぼすおそれがあるため、貴職においては、薬務主管課と医務主管課の協力の下、貴管下政令市、保健所設置市及び特別区と連携の上、貴管下医療機関等に対して、下記の内容について周知方願います。

記

- 1 別紙に記載のジャクソンリース回路については、自主回収の対象となった製品であり、閉塞等のおそれがあることから、各医療機関で使用している製品を確認し、該当製品を保有している場合、直ちに使用を中止し、各製造販売業者又は購入した医療機器販売業者に返却すること。
- 2 回収の対象外のジャクソンリース回路の使用時のみならず、呼吸回路の接続時には、添付文書や取扱説明書等に従って接続し、呼気・吸気の回路が確保されているかを確認するとともに、閉塞やリークが生じていないか注意すること。

(留意事項) 本通知の内容については、貴管下医療機関（歯科診療所を除く。）の医療安全に係る安全管理のための委員会の関係者、医療安全管理者、医療機器の安全使用のための責任者等に対しても周知されるようご配慮願います。

(参考) 本通知を含め、医薬品・医療機器の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、その情報をメールによって配信する「医薬品医療機器情報配信サービス」が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において運営されております。以下のURLから登録できますので、ご活用下さい。

医薬品医療機器情報配信サービス

<http://www.info.pmda.go.jp/info/idx-push.html>

(問い合わせ先)

各製品については、別紙に示す業者の連絡先




厚生労働省医薬食品局安全対策課

TEL: 03-5253-1111 (内線 2751、2758)

FAX: 03-3508-4364


【別添】

ジャクソンリース回路

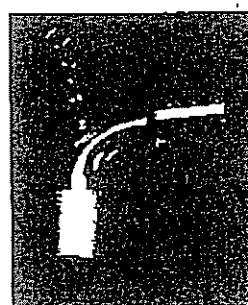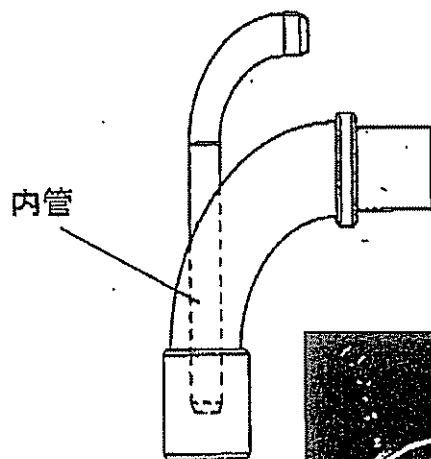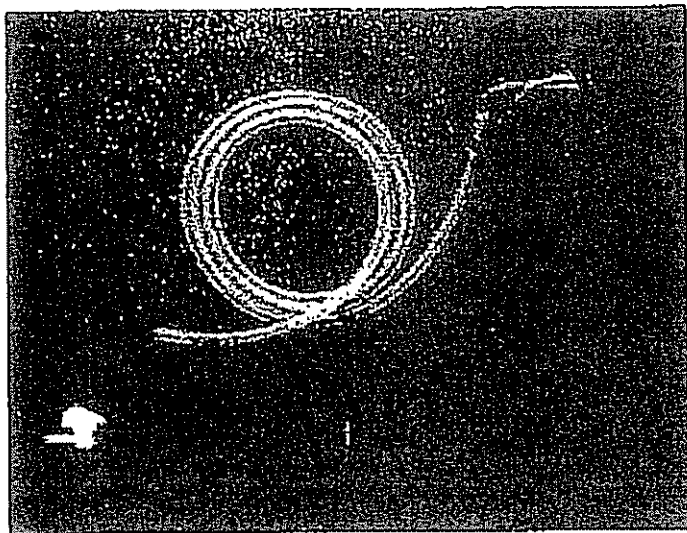


回収対象のジャクソンリース
回路は、内管の長いもの

内管が長い場合
(閉塞が発生する事例)

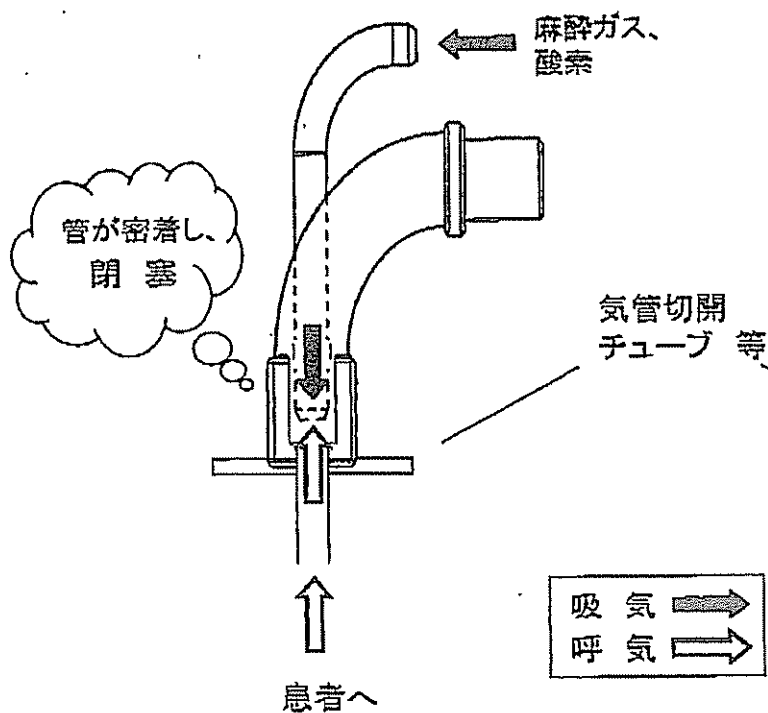

内管が短い場合
(正常な接続事例)

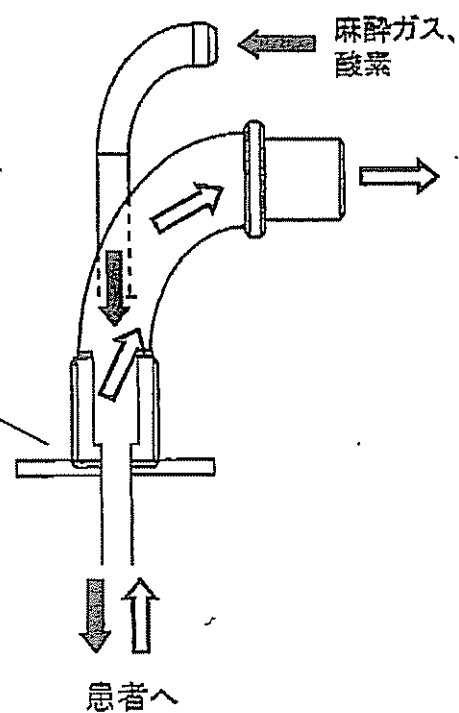

【別紙】

製造販売業者等により回収が行われた製品

製造販売業者等	製品名	連絡先	当時の自主回収	
			回収開始年月日	回収クラス 分類
五十嵐医科工業	OR ジャクソンリース セット	五十嵐医科工業株式会社 担当（安全管理責任者 五十嵐） TEL：03-3812-6101	平成13年4月2日	I
	B スイムジャクソンリース セット			
アコマ医科工業	「アコマ麻酔器PRO」の付属品である ジャクソンリース小児用麻酔回路	アコマ医科工業株式会社 担当（安全管理部 早川） TEL：03-3811-4151	平成13年3月23日	I
販売業者：アネス（過去の輸 入業者：アイカ）	デュパコ社製ノーマンマスクエルボ	株式会社アネス TEL：04-2960-1820	平成13年4月23日	II
小林製薬（アトムメディカル 株式会社より承継）	ジャクソンリース蘇生回路のうち垂直 型エルボーを有する製品	小林製薬株式会社 小林メディカ ルカンパニー 薬事・品質保証部 品質保証課 TEL：06-6222-6606	平成13年5月11日	II

※ いずれの製品も現在は販売されていない。