

福島医発第1188号(地) 付
平成25年8月6日



各 医 師 会 長 殿

福 岡 県 医 師 会
会長 松 田 峻一良
(公 印 省 略)

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR (FPD)
写真及び CR 写真の取扱い等について」の一部改正について

今般、標記の件につきまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より日本医師会を通じて周知及び協力依頼がありましたのでご連絡申し上げます。

本件は、エックス線写真に関して、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更されたことから、平成22年6月24日付基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR (FPD) 写真及び CR 写真の取扱い等について」において示された留意事項について、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真が DR 写真(半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真)である場合の留意事項が下記の通り改められたというものです。

つきましては、貴会会員への周知方につきましてご高配賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 撮像表示条件等の追加について

「じん肺健康診断等のための DR 撮像表示条件」及び「DR 撮像表示条件確認表」において、「富士フイルム」にかかる撮像表示条件等について、以下の画像処理条件を追加する。

(1) 画像処理条件の追加

「富士フイルム③」で示す画像処理条件について、従来のものより感度が高いが、従来のもので撮影した DR 写真と比較しても鮮鋭性は同程度であることが判明したことから、撮像表示条件について別添のとおり、画像処理条件を追加する。

また、撮影した写真に表示される撮像条件について、表示方法に変更があったことから、併せて別添の変更を行う。


2. その他留意事項

上記1以外の撮像表示条件については、変更がないことから、これらの条件で撮影された DR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

日医発第399号（地Ⅱ75）
平成 25年 7月25日

都道府県医師会長 殿

日本医師会長
横 倉 義 武

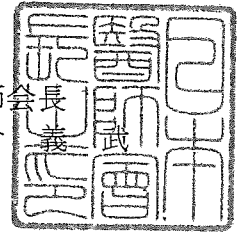

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR（FPD）
写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定におけるDR（FPD）写真及びCR写真の取扱い等について」の一部改正について、別添のとおり厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長より、本職宛に周知、協力方の依頼がありました。

本件は、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真がDR写真である場合の留意事項等を下記のとおりに改めたというものです。

つきましては、本件の趣旨をご理解の上、貴会会員等に対する周知方につきまして貴職のご高配をお願い申し上げます。

記

1. 撮像表示条件等の追加について

「じん肺健康診断等のためのDR撮像表示条件」及び「DR撮像表示条件確認表」において、「富士フイルム」にかかる撮像表示条件等について、以下の画像処理条件を追加する。

(1) 画像処理条件の追加

「富士フイルム③」で示す画像処理条件について、従来のものより感度が高いが、従来のもので撮影したDR写真と比較しても鮮鋭性は同程度であることが判明したことから、撮像表示条件について別添のとおり、画像処理条件を追加する。

また、撮影した写真に表示される撮像条件について、表示方法に変更があったことから、併せて別添の変更を行う。

2. その他留意事項

上記1以外の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影されたDR（FPD）写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。



基安労発0701第1号
平成25年7月1日

公益社団法人 日本医師会 御中

厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長
(契 印 省 略)

「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び
CR 写真の取扱い等について」の一部改正について

労働衛生行政の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

じん肺法（昭和35年法律第30号）に基づき、じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定（以下「じん肺健康診断等」という。）においては、エックス線写真を用いることとされております。

エックス線写真に関して、デジタル写真である「半導体平面検出器を搭載した一般撮影装置による写真」（以下「DR(FPD)写真」という。）及び Computed Radiography による写真（以下「CR 写真」という。）については、平成22年6月24日付け基安労発0624第1号「じん肺健康診断及びじん肺管理区分の決定における DR(FPD)写真及び CR 写真の取扱い等について」において、その留意事項等を示しているところであります。

今般、専門家による検討により、じん肺健康診断等において適正に使用することができる撮像表示条件が一部変更されたことから、じん肺健康診断等に用いるエックス線写真が DR 写真である場合の留意事項等を下記のとおり改めましたので、その実施及び貴管下の関係医療機関への周知いただきますよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。

記

1 撮像表示条件等の追加について

じん肺健康診断等において、DR 写真を用いる場合の各種条件を示した「じん肺健康診断等のための DR 撮像表示条件」及び「DR 撮像表示条件確認表」において、「富士フイルム」にかかる撮像表示条件等について、以下の画像処

理条件を追加する。

(1) 画像処理条件の追加

「富士フィルム③」で示す画像処理条件について、従来のものより感度が高いが、従来のもので撮影した DR 写真と比較しても鮮鋭性は同程度であることが判明したことから、撮像表示条件について別添のとおり画像処理条件を追加する。


また、撮影した写真に表示される撮像条件について、表示方法に変更があったことから、併せて別添のとおり変更を行う

2 その他留意事項

上記 1 以外の撮像表示条件については変更がないことから、これらの条件で撮影された DR(FPD)写真については、従前の確認表を用いても差し支えないこと。

じん肺健康診断等のための DR(FPD)撮像表示条件(追加分)

富士フィルム③	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C
	RE/MRE (周波数強調度)	0.0~0.3
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F
	DRN/MDB	2/A
	DRT/MDT	B
	DRE/MDE	0.0~0.6

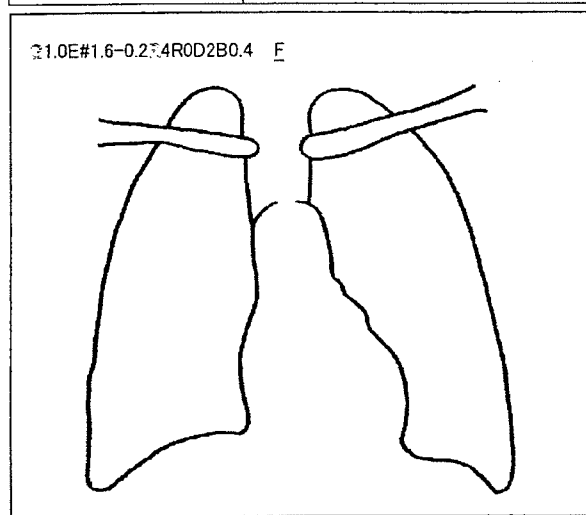

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左上部などに

「21.0E#1.6-0.2 4R0D2B0.4 F」などと表示され、

「21.0E#1.6(GS) 4(RN)R(RE)D2B(DRE) (CRF)」
に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2、

DRE は 0.0~0.6、RE は 0.0~0.3 の幅で表示される。

じん肺健康診断等のための DR(FPD)撮像表示条件確認表(追加分)

富士フィルム③	GA(回転量)	0.9～1.0	
	GS(階調シフト)	-0.2～-0.1	
	RN/MRB(周波数ランク)	4/C	
	RE/MRE(周波数強調度)	0.0～0.3	
	CRF(直接変換型のみ適用)	F	
	DRN/MDB	2/A	
	DRT/MDT	B	
	DRE/MDE	0.0～0.6	

じん肺健康診断等のための DR(FPD) 撮像表示条件

1 撮影条件:


電圧	110～140 [kV]
焦点被写体間距離	180～200 [cm]
出力サイズ	ライフサイズ (半切または大角フィルム)
撮影倍率	等倍撮影 (縮小撮影は認めない)
撮影条件表示	出力フィルムに「メーカー毎画像処理条件」が分かるように表示すること (メーカー毎に後述)
グリッド	限定しない (じん肺診査ハンドブックのグリッドの条件にも制約されない)
空間分解能	限定しない

2 画像処理条件(一般的表記):

階調処理	肺野部の最高濃度を 1.6～2.0 程度とすること
周波数処理	マルチ周波数等処理を行わないこと

3 メーカー毎画像処理条件 (50 音順):

キヤノン①	パラメータ	撮像表示条件
	E	*あるいは1
	D	*****
	対応濃度 (GCS に続く数値)	17～20
	コントラスト (上記に続く数値)	14～17

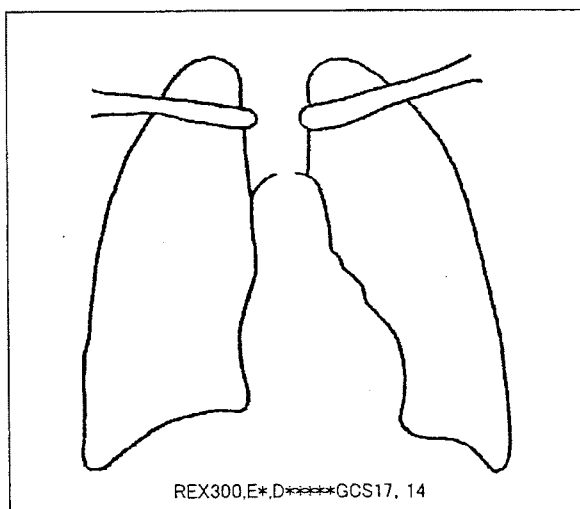


表示場所: 可変

表示例:

例えば写真中央下部などに
「REX300, E*, D***** GCS17, 14」などと
表示される。

REX に続く数値は条件には関係なく,
E は*あるいは1, D は*****と表示され,
GCS の後は 17～20, 14～17 の幅で表示される。


キャノン②	パラメータ	撮像表示条件
	強調度	OFF
	強調周波数	OFF
	ノイズ低減	OFF
	ダイナミックレンジ調整（高濃度）	OFF
	ダイナミックレンジ調整（低濃度）	0～3
	対応濃度	17～20
	コントラスト	14～17

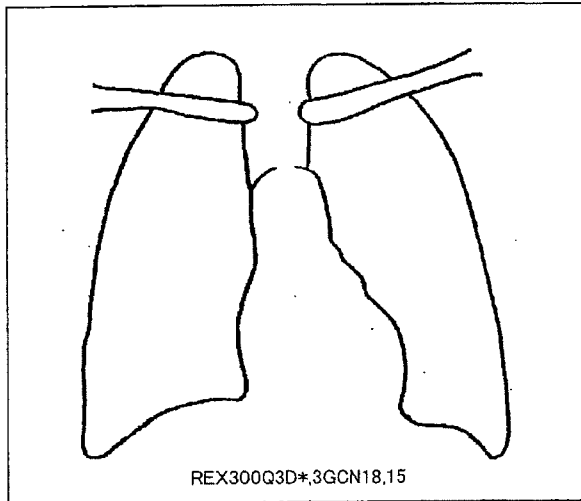

表示場所: 可変
 REX に続く数値は条件に関係なく Q3 は固定。
 ダイナミックレンジ圧縮(低濃度)を
 使用する場合には D に続いて
 ,1、,2、*,3 などと表示され、
 GCN の後は 17～20、14～17 の幅で表示される。

表示例:
 例えば写真下部などに
 「REX300Q3GCN17,14」
 「REX300Q3D*,1GCN17,14」
 「REX300Q3D*,2GCN18,15」
 「REX300Q3D*,3GCN17,15」
 などと表示される。


キャノン③	パラメータ	撮像表示条件
	強調度	OFF
	強調周波数	OFF
	ノイズ低減	OFF
	ダイナミックレンジ調整（高濃度）	OFF
	ダイナミックレンジ調整（低濃度）	0～3
	輝度	13～10
	コントラスト	14～17

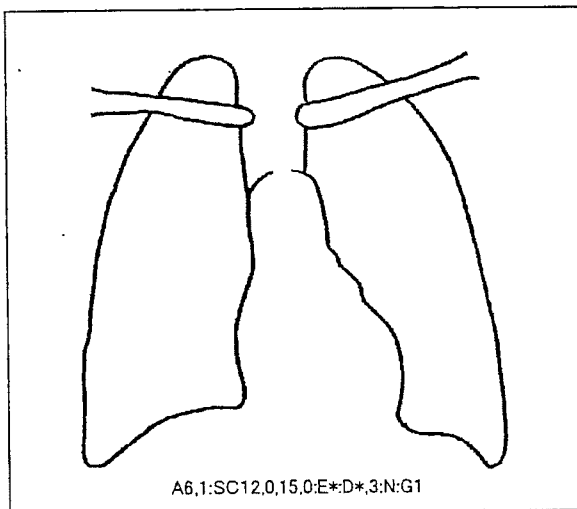

表示場所: 可変

表示例:
 例えば写真下中央部などに
 「A6,1:SC12,0,15,0:E*D*,3:N:G1」などと
 表示される。
 SC に続く数字が輝度、その2つ後に
 コントラストが表記される。
 ダイナミックレンジ圧縮(低濃度)は、
 D*,の後に数字が表示される。

ケアストリーム ヘルス	パラメータ	撮像表示条件
	Brightness	(下記)
	Latitude	
	Detail Contrast	

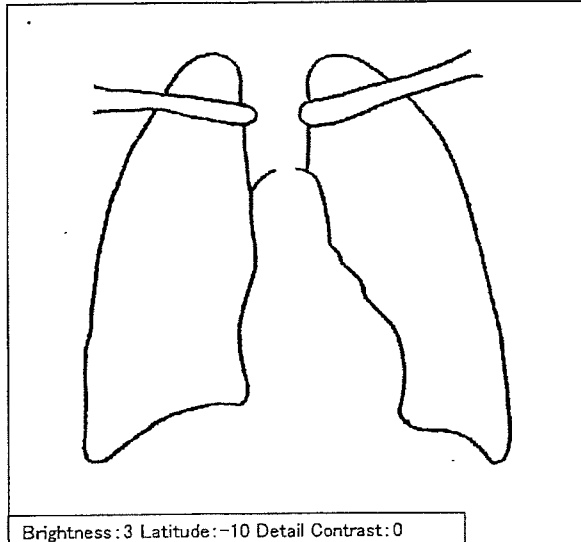

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左下部などに

Brightness: 3 Latitude: -10 Detail Contrast: 0

のように表示される。

ここで表示されるパラメータは

ア～キのいずれかでなくてはならない。

ア Brightness: 3 Latitude: -10～-7 Detail Contrast: 0

イ Brightness: 3 Latitude: -7 Detail Contrast: -1

(イは DR 圧縮・非圧縮とも可)

ウ Brightness: 3 Latitude: -7 Detail Contrast: -2

エ Brightness: 3 Latitude: -6 Detail Contrast: 0


オ Brightness: 3 Latitude: -10～-8 Detail Contrast: 1

カ Brightness: 3 Latitude: -10 Detail Contrast: 2

キ Brightness: 3 Latitude: -4 Detail Contrast: -1

(キは DR 圧縮のみ可)

コニカミノルタ①	パラメータ	撮像表示条件
	肺野濃度 (H)	1.6～1.8
	周波数強調度 (HF)	0.0
	周波数強調タイプ (HF)	OFF
	LUT	THX-2

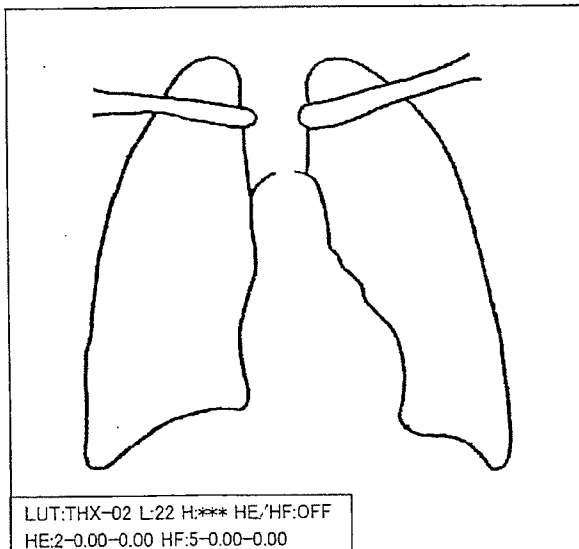

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左下部などに

検査日時

患者氏名 性別

生年月日 患者 ID

LUT: THX-02 L: 22 H: *** HE/ HF: OFF

HE: 2-0.00-0.00 HF: 5-0.00-0.00

のように表示される。

ここで、LUT: の後が LUT の種別を (THX-02 で固定)、
H: の後の***が肺野濃度の 100 倍の数値を示す。


他の数値については、HE/ HF は OFF、

HE および HF の値は*-0.00-0.00 (*は任意)

でなくてはならない。

なお、L: の後は中央濃度の 100 倍の数値を示す。

コニカミノルタ②	パラメータ	撮像表示条件
	肺野濃度 (H)	1.6～1.8
	HE タイプ	HE-STANDARD2
	HE 強調度 (低濃度側強調)	0.0～0.50
	HE 強調度 (高濃度側強調)	0.00
	HF タイプ	HF-STANDARD4
	HF 強調度 (低濃度側強調)	0.00～0.30
	HF 強調度 (高濃度側強調)	0.00～0.50
	LUT	THX-2

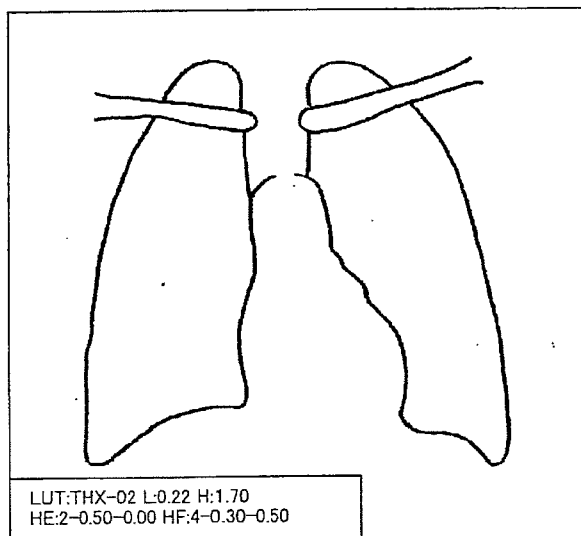

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左下部などに

検査日時

患者氏名 性別

生年月日 患者 ID

LUT:THX-02 L:0.22 H:1.70

HE:2-0.50-0.00 HF:4-0.30-0.50

のように表示される。

ここで、LUT:の後が LUT の種別を示す。


H:の後の 1.70 が肺野濃度の数値を示す。(※)

HE および HF の値は、それぞれタイプ-低濃度側強調-高濃度側強調の順で表示される。

なお、L:の後は中央陰影の濃度を示す。(※)

(※) 2011 年 4 月以前の製品においては、
100 倍の数値で示される。

コニカミノルタ③	パラメータ	撮像表示条件
	Contrast (C)	119～130
	Brightness (B)	152～157
	Edge (E)	1

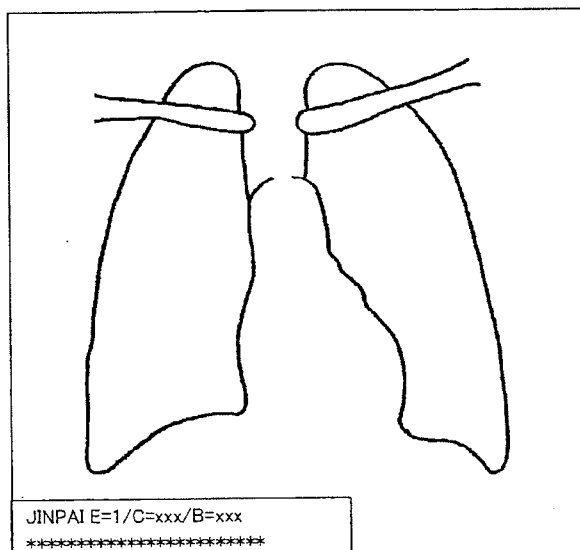

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左下部に


「JINPAI E=1 / C=119 / B=152」

などと表記される。

C は 119～130, B は 152～157 の幅で表示され、

E は 1 と表示される。

コニカミノルタ④	パラメータ	撮像表示条件
	Contrast (C)	119~130
	Brightness (B)	152~157
	Edge (E)	1
	Tissue Equalization (TE)	0~40/0~20, 0/0

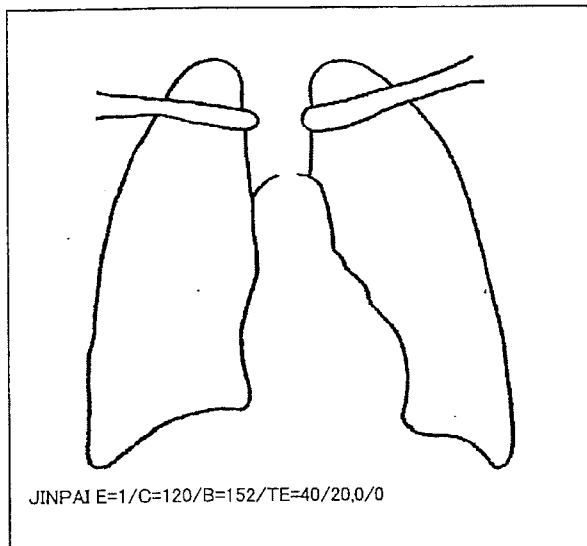

表示場所：可変

表示例：

例えば写真左下部に


「JINPAI E=1/C=120/B=152/TE=40/20,0/0」

などと表記される。

C は 119~130, B は 152~157 の幅で表示され、
E は 1 と表示される。

TE は、0~40/0~20,0/0 と表示される。

島津製作所①	パラメータ	撮像表示条件
	W	11500~12500
	L	6000~6500
	E	0

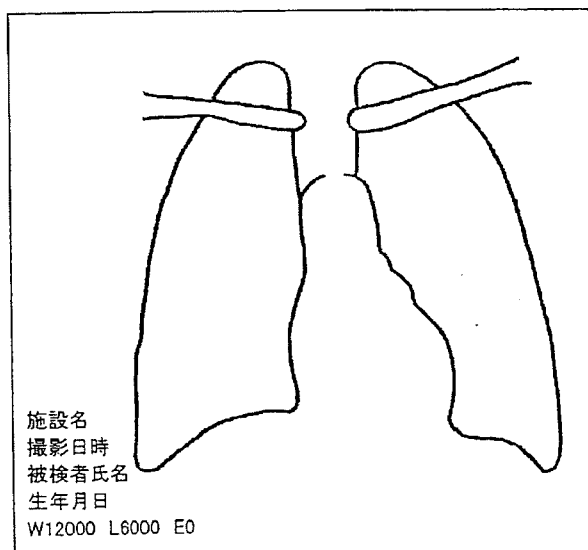


表示場所：写真左下部

表示例：

例えば「W12000 L6000, E0」などと出力される。

W は 11500~12500, L は 6000~6500 の幅で
表示され、E は 0 と表示される。

島津製作所②	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN (周波数ランク)	4
	RE (周波数強調度)	0
	CRF (鮮鋭度フィルター)	F

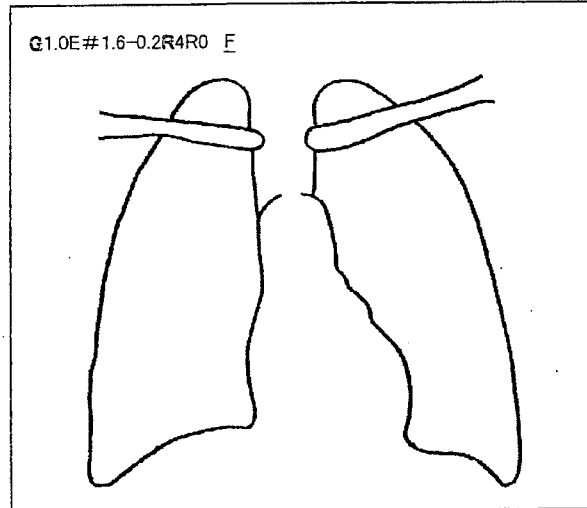

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左上部などに

「Q1.0E#1.6-0.2R4R0 E」


などと表示され、

「Q(GA)#1.6(GS)R(RN)R(RE) (CRF)」

に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2 の幅で
表示される。

島津製作所③	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C
	RE/MRE (周波数強調度)	0/0
	CRF (鮮鋭度フィルター)	F
	DRN/MDB	2/A
	DRT/MDT	B/B
	DRE/MDE	0.0~0.6/0.0~0.6

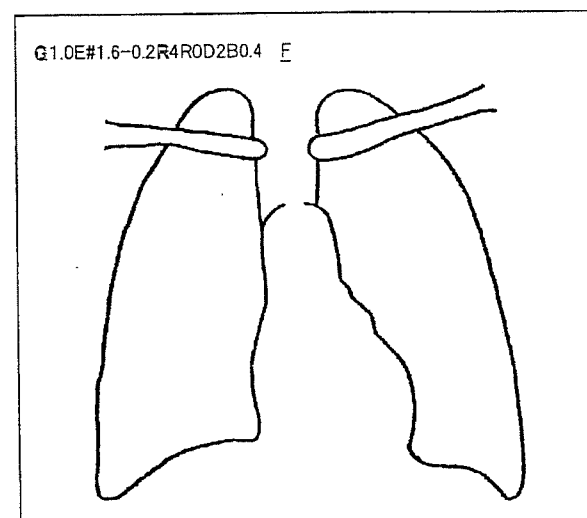

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左上部などに


「Q1.0E#1.6-0.2R4R0D2B0.4 E」などと表示され、

「Q(GA)E#1.6(GS)R(RN)R(RE)D2B(DRE) (CRF)」

に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2、
DRE は 0.0~0.6 の幅で表示される。

シーメンス旭 メディテック	パラメータ	撮像表示条件
	SF	0/***
	H	0/***
	LUT	8
	W	2300~3300
	C	1900~2300

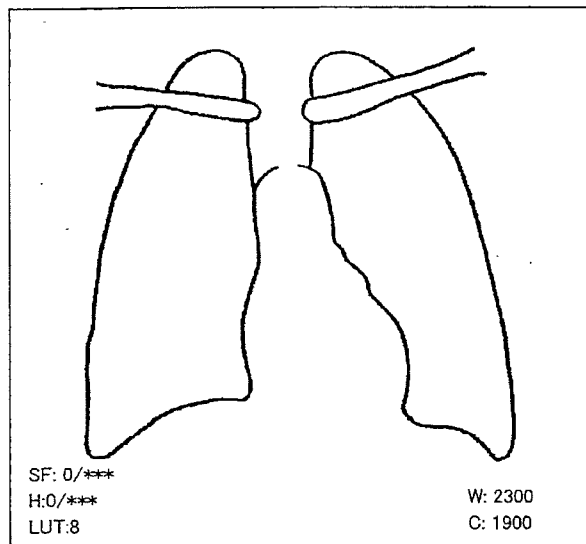


表示場所: フィルム面の左下と右下

表示例:

SF は 0/***、H は 0/***と表示され、
W は 2300~3300、C は 1900~2300 の幅で表示される。

GE ヘルスケア・ ジャパン①	パラメータ	撮像表示条件
	Contrast (C)	119~130
	Brightness (B)	152~157
	Edge (E)	1

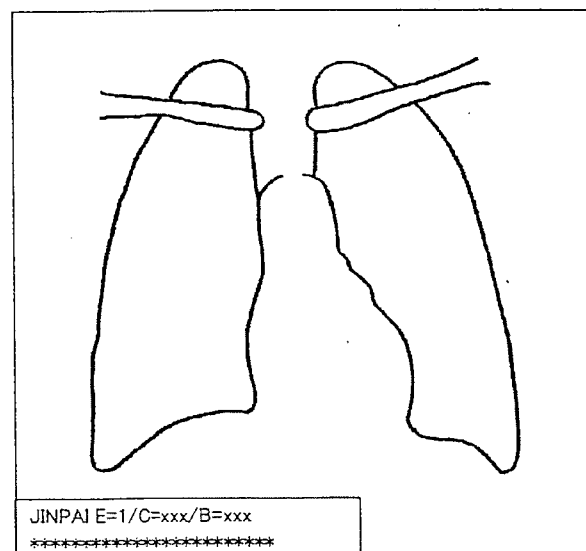

表示場所: 可変


表示例:

例えば写真左下部に
「JINPAI E=1 / C=119 / B=152」

などと表記される。

C は 119~130、B は 152~157 の幅で表示され、
E は 1 と表示される。

GE ヘルスケア・ ジャパン②	パラメータ	撮像表示条件
	Contrast (C)	119~130
	Brightness (B)	152~157
	Edge (E)	1
	Tissue Equalization (TE)	0~40/0~20, 0/0

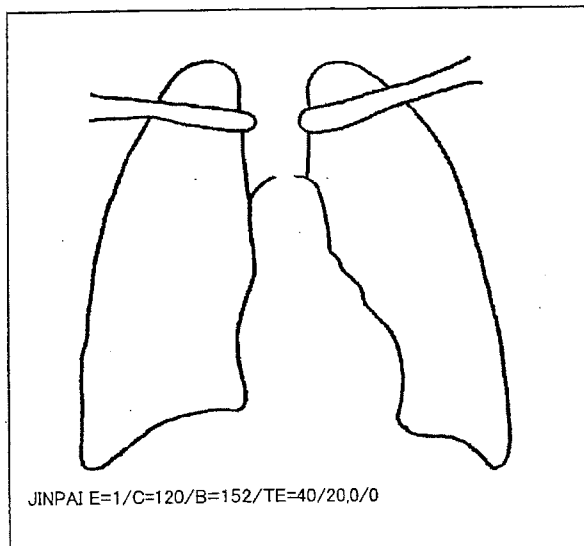

表示場所：可変

表示例：

例えば写真左下部に

「JINPAI E=1/C=120/B=152/TE=40/20,0/0」


などと表記される。

C は 119~130, B は 152~157 の幅で表示され、

E は 1 と表示される。

TE は、0~40/0~20,0/0 と表示される。

東芝メディカル システムズ	パラメータ	撮像表示条件
	WL	1800~2400
	WW	1200~2800
	G	07
	D	0 or AHOL0~AHOL2 (0 or HOL1~HOL2)
	I (F)	0
	E	00

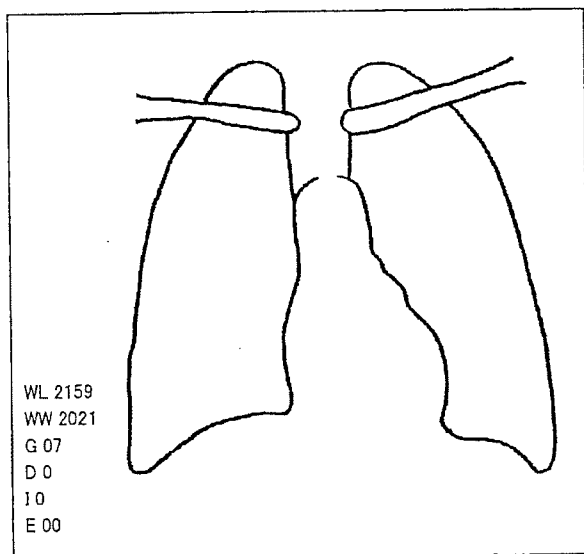

表示場所：可変

表示例：

例えば写真左下部に

「WL2159, W2021, G07, DAHOL2, I0, E00」

などと表示される。

WL は 1800~2400、WW は 1200~2800 の幅で表示され、

G は 07 と表示され、


D は 0 あるいは AHOL0~AHOL2 の幅で表示され、

(バージョンにより 0 or HOL1~HOL2 の幅で表示される)

I(バージョンにより F と表示される)は 0、

E は 00 と表示される。

日立メディコ	パラメータ	撮像表示条件
	フィルター	0～3
	マスクサイズ	5
	DRC	0～4
	γ	3
	WL	2100
	WW	3850

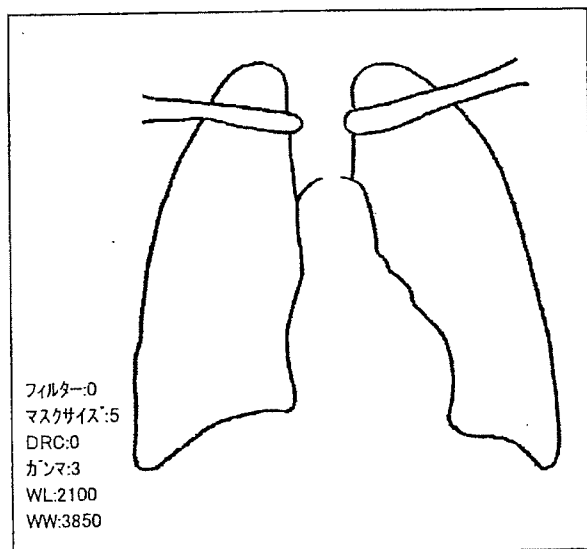


表示場所: 四隅のうちの1箇所

表示例:

フィルターは 0～3 の幅で表示され、
マスクサイズは 5、DRC は 0～4 の幅で表示され、
 γ は 3、WL は 2100、WW は 3850 と表示される。

フィリップス エレクトロニクス ジャパン①	パラメータ	撮像表示条件
	Density (D)	15～17
	Gamma (G)	40～45
	NC (N)	00～03
	DCE	00

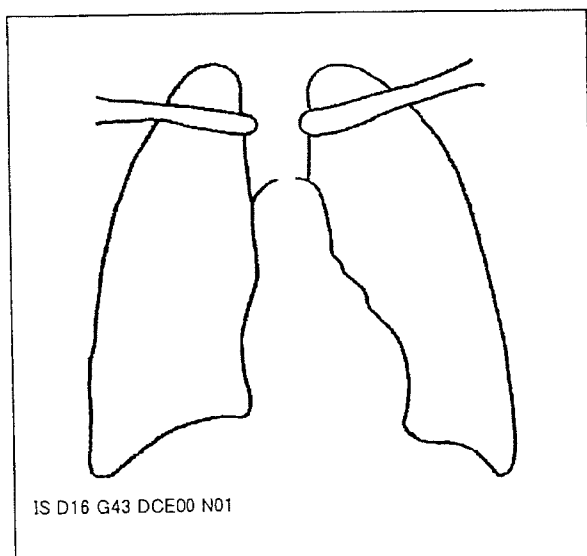


表示場所: 写真下部左

表示例:

例えば「IS D16 G43 DCE00 N01」などと表示される。
D は 15～17、G は 40～45、N は 00～03 の幅で
表示され、DCE は 00 と表示される。

フィリップス エレクトロニクス ジャパン②	パラメータ	撮像表示条件
	Density (D)	15~17
	Gamma (G)	40~45
	NC (N)	00~03
	DC	40~45 (Gと同じ値)
	CB	10~05

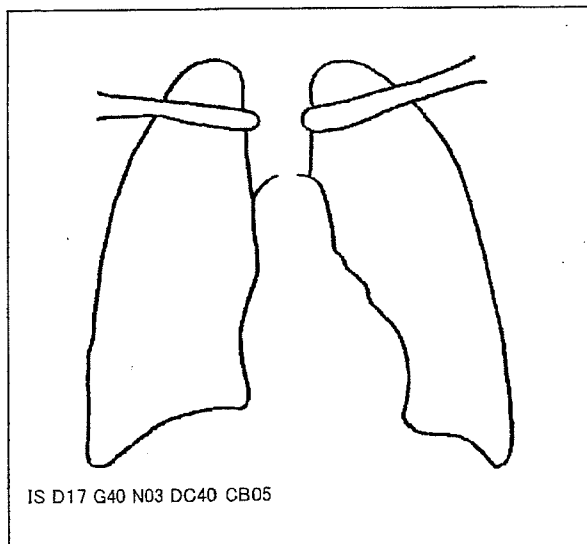

表示場所：写真下部左

表示例：


例えば「IS D17 G40 N03 DC40 CB05」
など表示される。

D は 15~17、G は 40~45、N は 00~03、

DC は G と同じ値で 40~45、

CB は 10~05 の幅で表示される。

富士フィルム①	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN (周波数ランク)	4
	RE (周波数強調度)	0
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F

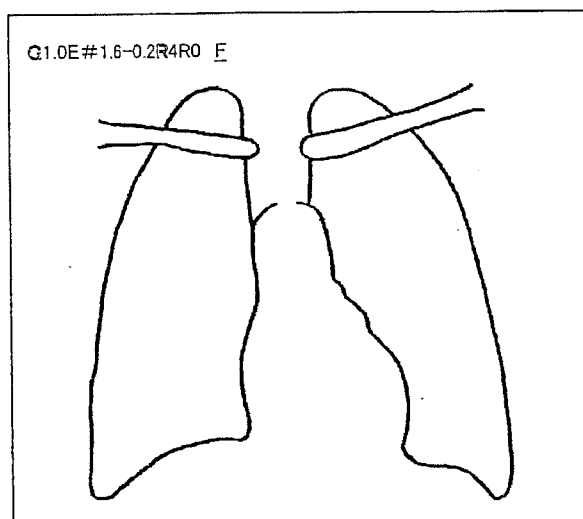

表示場所：可変

表示例：

例えば写真左上部などに

「G1.0E#1.6-0.2R4R0 E」

など表示され、


「G(GA) #1.6(GS) R(RN) R(RE) (CRF)」

に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2 の幅で

表示される。

富士フィルム②	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C
	RE/MRE (周波数強調度)	0/0
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F
	DRN/MDB	2/A
	DRT/MDT	B/B
	DRE/MDE	0.0~0.6/0.0~0.6

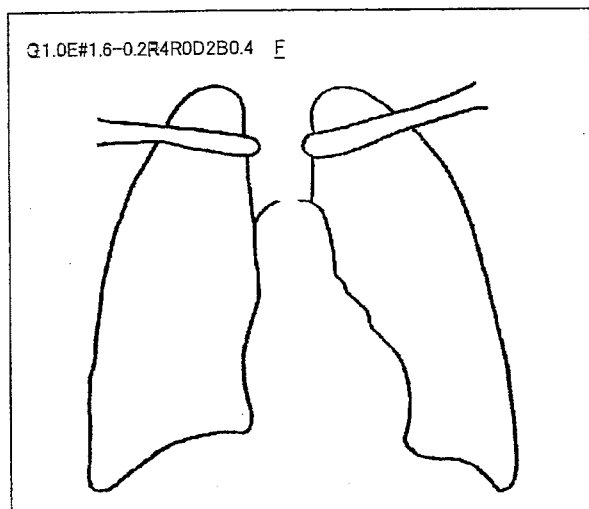

表示場所: 可変


表示例:

例えば写真左上部などに

「Q1.0E#1.6-0.2R4R0D2B0.4 E」などと表示され、
「Q(GA)E#1.6(GS)R(RN)R(RE)D2B(DRE) (CRF)」
に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2、
DRE は 0.0~0.6 の幅で表示される。

富士フィルム③	パラメータ	撮像表示条件
	GA (回転量)	0.9~1.0
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C
	RE/MRE (周波数強調度)	0.0~0.3
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F
	DRN/MDB	2/A
	DRT/MDT	B
	DRE/MDE	0.0~0.6

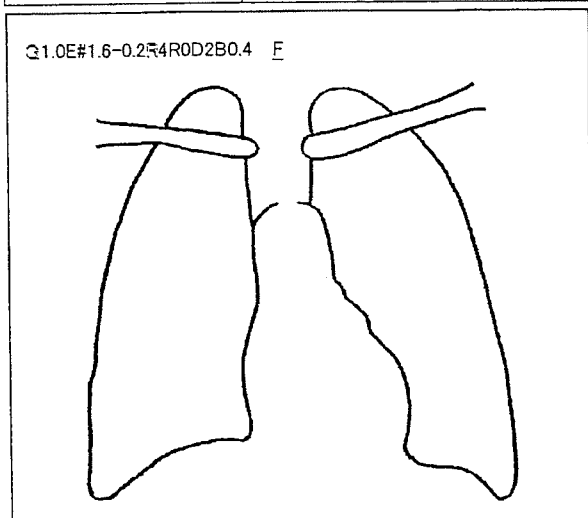

表示場所: 可変


表示例:

例えば写真左上部などに

「Q1.0E#1.6-0.2R4R0D2B0.4 E」などと表示され、
「Q(GA)E#1.6(GS)R(RN)R(RE)D2B(DRE) (CRF)」
に対応する。

GA は 0.9~1.0、GS は -0.1~-0.2、
DRE は 0.0~0.6、RE は 0.0~0.3 の幅で表示される。

ダイトーマイテック	パラメータ	撮像表示条件
	GS	-2~0
	GR	-4~-1
	E	0~2 (0 は表示無し)
	DL	0, 500, 800 (0 は表示無し)

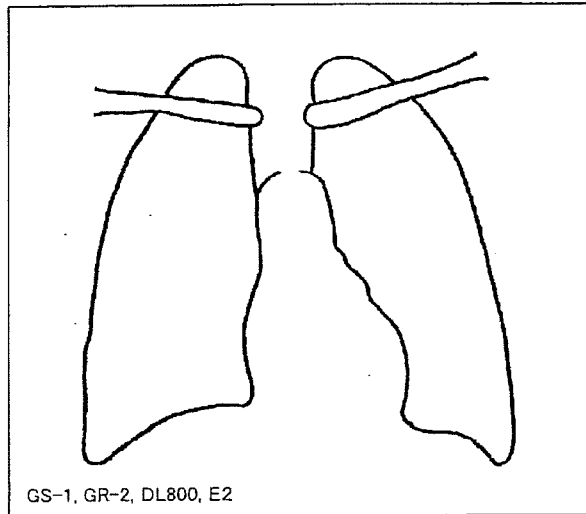

表示場所: 可変

表示例:

例えば写真左下部に

「GS-1, GR-2, DL800, E2」


などと表示される。

GS は-2~0、GR は-4~-1、

E は 1, 2 (0 は表示無し)、

DL は 500, 800 (0 は表示無し) と表示される。

ティーアンドエス	パラメータ	撮像表示条件
	S(シャープネス)	-1~0
	C(コントラスト)	0
	B(ブライトネス)	-1~0

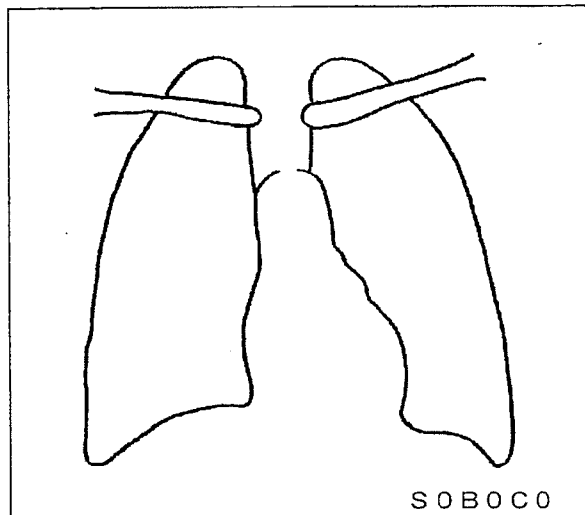

表示場所: 可変

表示例:

例えば右下に 「S0C0B0」 などと表示される。

DR(FPD)撮像表示条件確認表

申請者名 _____

撮影日 (年 月 日)

比較読影に用いた写真(いずれかに○)

() じん肺標準エックス線写真集(平成23年3月)電子媒体版

() じん肺標準エックス線フィルム(昭和53年)

撮影条件

	審査受付条件	申請者の撮像表示条件
電圧	110～140 [kV]	
焦点被写体間距離	180～200 [cm]	
出力サイズ	ライフサイズ(半切または大角フィルム)	
撮影倍率	等倍撮影(縮小撮影は認めない)	
撮影条件表示	出力フィルムにメーカー毎画像処理条件が分かるように表示すること	
グリッド	限定しない(じん肺診査ハンドブックのグリッドの条件にも制約されない)	
空間分解能	限定しない	

画像処理条件(一般的表記)

	審査受付条件	申請者の撮像表示条件
階調処理	肺野部の最高濃度を1.6～2.0程度とすること	
周波数処理	マルチ周波数等処理を行わないこと	

メーカー毎画像処理条件(50音順)

メーカー	パラメータ	撮像表示条件	申請者の撮像表示条件
------	-------	--------	------------

キヤノン①	E	*あるいは1	
	D	*****	
	対応濃度(GCSに続く数値)	17～20	
	コントラスト(上記に続く数値)	14～17	

キヤノン②	強調度	OFF	
	強調周波数	OFF	
	ノイズ低減	OFF	
	ダイナミックレンジ調整(高濃度)	OFF	
	ダイナミックレンジ調整(低濃度)	0～3	
	対応濃度	17～20	
	コントラスト	14～17	

キヤノン③	強調度	OFF	
	強調周波数	OFF	
	ノイズ低減	OFF	
	ダイナミックレンジ調整(高濃度)	OFF	
	ダイナミックレンジ調整(低濃度)	0～3	
	輝度	13～10	
	コントラスト	14～17	

メーカー	パラメータ	撮像表示条件				申請者の撮像表示条件
ケアストリームヘルス	※	ア	イ*	ウ	エ	ア・イ・ウ・エ (該当に○)
	Brightness	3	3	3	3	
	Latitude	-10~-7	-7	-7	-6	
	Detail Contrast	0	-1	-2	0	
	※	オ	カ	キ**		オ・カ・キ (該当に○)
	Brightness	3	3	3		
	Latitude	-10~-8	-10	-4		
	Detail Contrast	1	2	-1		
※ア～キいずれかの条件を満たす必要がある。例えばアの条件の場合、Brightnessは3、Latitudeは-10~-7のいずれか、Detail Contrastは0である必要がある。イ*はDR圧縮・非圧縮とも可、キ**はDR圧縮のみ可。						
コニカミノルタ①	肺野濃度 (H)	1.6~1.8				
	周波数強調度 (HF)	0.0				
	周波数強調タイプ (HF)	OFF				
	LUT	THX-2				
コニカミノルタ②	肺野濃度 (H)	1.6~1.8				
	HE タイプ	HE-STANDARD2				
	HE 強調度 (低濃度側強調)	0.0~0.50				
	HE 強調度 (高濃度側強調)	0.00				
	HF タイプ	HF-STANDARD4				
	HF 強調度 (低濃度側強調)	0.00~0.30				
	HF 強調度 (高濃度側強調)	0.00~0.50				
	LUT	THX-2				
コニカミノルタ③	Contrast (C)	119~130				
	Brightness (B)	152~157				
	Edge (E)	1				
コニカミノルタ④	Contrast (C)	119~130				
	Brightness (B)	152~157				
	Edge (E)	1				
	Tissue Equalization (TE)	0~40/0~20, 0/0				
島津製作所①	W	11500~12500				
	L	6000~6500				
	E	0				
島津製作所②	GA (回転量)	0.9~1.0				
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1				
	RN (周波数ランク)	4				
	RE (周波数強調度)	0				
	CRF (鮮鋭度フィルター)	F				
島津製作所③	GA (回転量)	0.9~1.0				
	GS (階調シフト)	-0.2~-0.1				
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C				
	RE/MRE (周波数強調度)	0/0				
	CRF (鮮鋭度フィルター)	F				
	DRN/MDR	2/A				
	DRT/MDT	B/B				
	DRE/MDE	0.0~0.6/0.0~0.6				
シーメンス旭メディテック	SF	0/***				
	H	0/***				
	LUT	8				
	W	2300~3300				
	C	1900~2300				

メーカー	パラメータ	撮像表示条件	申請者の撮像表示条件
GE ヘルスケア・ ジャパン①	Contrast (C)	119～130	
	Brightness (B)	152～157	
	Edge (E)	1	
GE ヘルスケア・ ジャパン②	Contrast (C)	119～130	
	Brightness (B)	152～157	
	Edge (E)	1	
	Tissue Equalization (TE)	0～40/0～20, 0/0	
東芝メディカル システムズ	WL	1800～2400	
	WW	1200～2800	
	G	07	
	D	0 or AHOL0～AHOL2 (0 or HOL1～HOL2)	
	I (F)	0	
	E	0	
日立メディコ	フィルター	0～3	
	マスクサイズ	5	
	DRC	0～4	
	γ	3	
	WL	2100	
	WW	3850	
フィリップス エレクトロニクス ジャパン①	Density (D)	15～17	
	Gamma (G)	40～45	
	NC (N)	00～03	
	DCE	00	
フィリップス エレクトロニクス ジャパン②	Density (D)	15～17	
	Gamma (G)	40～45	
	NC (N)	00～03	
	DC	40～45 (G と同じ値)	
	CB	10～05	
富士フィルム①	GA (回転量)	0.9～1.0	
	GS (階調シフト)	-0.2～-0.1	
	RN (周波数ランク)	4	
	RE (周波数強調度)	0	
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F	
富士フィルム②	GA (回転量)	0.9～1.0	
	GS (階調シフト)	-0.2～-0.1	
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C	
	RE/MRE (周波数強調度)	0/0	
	CRF (鮮鋭度フィルター) ※直接変換型のみに適用	F	
	DRN/MDB	2/A	
	DRT/MDT	B/B	
	DRE/MDE	0.0～0.6/0.0～0.6	
富士フィルム③	GA (回転量)	0.9～1.0	
	GS (階調シフト)	-0.2～-0.1	
	RN/MRB (周波数ランク)	4/C	
	RE/MRE (周波数強調度)	0.0～0.3	
	CRF (直接変換型のみに適用)	F	
	DRN/MDB	2/A	
	DRT/MDT	B	
	DRE/MDE	0.0～0.6	

ダイトーマイテック	GS	-2~0	
	GR	-4~-1	
	E	0~2 (0 は表示無し)	
	DL	0, 500, 800 (0 は表示無し)	

ティーアンドエス	S(シャープネス)	-1~0	
	C(コントラスト)	0	
	B(ブライトネス)	-1~0	

確認日 (年 月 日)

判定 (適 ・ 否)